

124*225mm

TERMOMETRO DIGITALE PUNTA FLESSIBILE PL157



AVVERTENZE

- Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il termometro digitale.
- Pericolo di soffocamento: il cappuccio del termometro e la batteria possono causare soffocamento, se ingeriti. Non consentire ai bambini di utilizzare questo dispositivo senza la supervisione dei genitori.
- Non utilizzare il termometro nell'orecchio. L'utilizzo previsto è solo per letture orali, retali e ascellari.
- Non posizionare la batteria del termometro vicino a fonti di calore estremo poiché potrebbe esplodere.
- Nota: l'uso di un eventuale copri-sonda può provocare una discrepanza di 0,1 °C dalla temperatura effettiva.
- Si consiglia di verificare le prestazioni del termometro ogni due anni.
- Rimuovere la batteria dal dispositivo quando non viene utilizzato per un lungo periodo.
- L'autodiagnosi sulla base della sola rilevazione della temperatura può essere fuorviante e quindi pericolosa, con possibili conseguenze sullo stato di salute. Consultare il proprio medico per l'interpretazione dei risultati.
- Non effettuare misurazioni quando il termometro è bagnato poiché potrebbero verificarsi letture imprecise.
- In caso di utilizzo orale, non stringere il termometro con i denti: ciò potrebbe causare rotture e/o lesioni.
- Non tentare di smontare o riparare il termometro: ciò potrebbe avere effetti sul funzionamento del termometro e d invalida la garanzia.
- Dopo ogni utilizzo, disinfettare il termometro con alcol o altra soluzione, soprattutto se il dispositivo viene utilizzato da più persone.
- Non forzare il termometro nel retto. L'inserimento del termometro non deve mai causare dolore; se si presenta questa eventualità interrompere subito l'inserimento, per evitare di causare lesioni.
- Non utilizzare il termometro per via orale, dopo l'uso per via rettale senza che esso sia stato adeguatamente disinfettato .
- Per i bambini di età pari o inferiore a due anni, non utilizzare per via orale.


SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO

Questo termometro digitale fornisce una lettura rapida e altamente accurata della temperatura corporea. Per comprendere meglio le sue funzioni e per un utilizzo duraturo con risultati affidabili, leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.

Questo termometro è prodotto secondo il sistema di EN12470-3: 2000 + A1 : 2009, ASTM E1 1 12-00 (Ri-approvazione 2011); il produttore è EN ISO 9001: 2008 e EN ISO 13485: 2012 / AC: 2012.

CONTENUTO

1 termometro, 1 manuale d'uso, 1 custodia

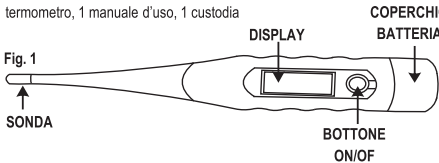

PRECAUZIONI

Le prestazioni del dispositivo potrebbero venire meno se si verifica una o più delle seguenti condizioni:

- funzionamento al di fuori dell'intervallo di temperatura e umidità indicato dal produttore
- conservazione al di fuori dell'intervallo di temperatura e umidità indicato dal produttore
- shock meccanico (ad es. caduta o altri incidenti)
- la temperatura del paziente è inferiore alla temperatura ambiente

Non utilizzare nelle immediate vicinanze di dispositivi quali cellulari e forni micro onde, in quanto essi generano forti campi elettici elettromagnetici, che potrebbero diventare fonti di interferenza per il termometro.

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI

- Corrente continua **LOT** Lotto produzione Fabbricante Parte applicata - Tipo BF
- Attenzione: consultare il manuale d'uso o le istruzioni

SPECIFICHE

Tipo:	Termometro digitale (non predittivo)
Intervallo di misura:	32,0°C - 42,9°C (90.0°F-109°F) ±0,1°C per temperature 35,5°C-42,0 °C (±0,2°F 95.9°F-107.6°F)
Precisione :	± 0,2°C <35,5° C o >42,0°C (± 0,4°F <95.9°F >107.6°F) (dati validi per una temperatura ambientale 18°C~ 28°C (64.4°F~ 82.4°F)
Schermo:	Display a cristalli liquidi
Memoria:	Ultimo valore rilevato
Batteria:	1 batteria 1,5V a bottone (LR41 o SR41)
Durata della batteria:	Circa 200 ore
Dimensione:	12,4 cm x 1,8 cm x 0,9 cm
Peso:	10g ca. inclusa la batteria
Limiti temperatura per l'utilizzo:	Temperatura: 5°C ~ 40°C (41°F ~104°F) Umidità relativa: 15% ~ 95% RH
Limiti temperatura per la conservazione:	Temperatura: -20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F) Umidità relativa : 15%~ 95% RH IP 27
Classificazione protezione:	Parte applicata - Tipo BF (dispositivo da applicare a diretto contatto con il paziente)
Classificazione:	

INDICAZIONI

1. Premere il pulsante di accensione/spegnimento accanto al display LCD: verrà emesso un segnale acustico e lo schermo mostrerà il simbolo  seguito dall'ultima valore di temperatura registrato. Dopo questo self-test , il termometro è ora pronto per la misurazione. Per passare da °C a °F, basterà tenere premuto il tasto ON/OFF per circa 3/4 secondi.

* Nota: se la temperatura misurata è inferiore a 32°C (90°F), il display LCD visualizzerà **Lo**, se la temperatura misurata è superiore a 42,9°C (109.9°F) il display LCD visualizzerà **Hi**.

2. Posizionare il termometro nella posizione desiderata (bocca, retto o ascella).

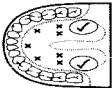


Fig. 2

a) **Uso orale:** posizionare il termometro sotto la lingua come nell'illustrazione Fig.2 nelle posizioni indicate dal simbolo "✓" . Chiudere la bocca e respirare in modo regolare attraverso il naso, per evitare che la misurazione venga influenzata dall'aria inspirata ed espirata. Tempo di misura: 60"circa. Temperatura normale tra i 35,7°C e i 37,3°C (tra i 96.3°F e i 99.1°F)

b) **Uso rettale:** lubrificare la punta della sonda con della vaselina o altro lubrificante per un facile inserimento. Inserire delicatamente il sensore per circa 1 cm nel retto. Tempo di misura: 120"circa. Temperatura normale tra 36,2°C e 37,7° C (97.2°F - 99.9°F).

c) **Uso ascellare:** pulire la zona da eventuale sudore. Posizionare la sonda sotto l'ascella e tenere il braccio ben premuto a lato. Da un punto di vista medico, questo metodo fornirà letture imprecise e non dovrebbe essere utilizzato se sono necessarie misurazioni precise. Tempo di misura: si raccomanda di mantenere il termometro sotto l'ascella per almeno 5-6 minuti anche dopo avere sentito il segnale acustico beep di fine misurazione. Temperatura normale tra 35,2° C e 36,7°C (95.4°F - 98.1°F).

3. Il segno dei °C/°F lampeggerà durante la misurazione. Quando smetterà di lampeggiare, verrà emesso un segnale acustico per circa 10 secondi. Contemporaneamente apparirà sul display la temperatura misurata. Il *tempo minimo* di misurazione fino al segnale acustico (beep) deve essere mantenuto senza eccezioni. La misurazione continua anche dopo il beep. La temperatura visualizzata non cambierà quando il termometro viene rimosso dalla sua posizione di prova.

- **Nota:** in caso di temperatura normale il segnale acustico è di questo tipo "beep-beep-beep"; quando la temperatura raggiunge o supera i 37,8°C (100°F), il segnale acustico sarà distinguibilmente più rapido "bee-bee-beep – bee-bee-beep – bee-bee-beep".

4. Per prolungare la durata della batteria, premere il pulsante On/Off per spegnere l'unità al termine del test. Se non viene intrapresa alcuna azione, l'unità si spegnerà automaticamente dopo circa 10 minuti.

5. Riporre il termometro nella sua custodia protettiva.

SOSTITUZIONE BATTERIA

1. Sostituire la batteria quando il  simbolo appare nell'angolo inferiore destro del display LCD.
2. Rimuovere il coperchio della batteria come mostrato nella Fig. 3
3. Estrarre delicatamente il circuito stampato in plastica con il vano batteria di circa 1 cm - Fig. 4
4. Utilizzare un oggetto appuntito (es. una penna) per rimuovere la vecchia batteria, che andrà smaltita secondo le disposizioni in vigore. Inserire una nuova batteria a bottone da 1,5V (tipo LR41 o SR41 o UCC392 o equivalente). Assicurarsi che la batteria sia installata con la polarità rivolta verso l'alto - Fig. 5
5. Reinserire il vano batteria e richiudere il coperchio.

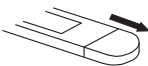


Fig. 3



Fig. 4

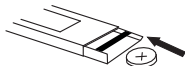


Fig. 5

PULIZIA E DISINFEZIONE

Pulire il termometro con un panno morbido. In caso di macchie ostinate, pulire il termometro con un panno inumidito con acqua e una soluzione detergente neutra ed asciugare con un panno morbido e pulito.

Per disinfettare il termometro, passarlo con un panno morbido leggermente inumidito con alcol.

ATTENZIONE:

- Non utilizzare benzene, benzina, altri solventi o diluenti aggressivi per pulire il termometro
- Non immergere la sonda in alcool per lunghi periodi di tempo, né tentare di sterilizzarla utilizzando acqua calda (>50°C/122°F)
- Non utilizzare pulitori ad ultrasuoni per pulire il termometro

GARANZIA

Il termometro è garantito per 24 mesi dalla data di acquisto che deve essere rilevabile da un idoneo documento di acquisto (scontrino, fattura etc.). In caso di malfunzionamento dovuto a componenti difettosi o di difetti di fabbricazione, il termometro verrà riparato o sostituito gratuitamente. Tutti i componenti sono coperti da questa garanzia, esclusa la batteria. La garanzia non copre i danni dovuti a un uso improprio, ad incidenti (es. cadute) o alla manomissione. In caso di malfunzionamento si prega di contattare SANICO SRL – info@sanicare.it – tel. 02/90390038.



Lo smaltimento di questo prodotto e delle sue batterie usate deve essere effettuata in conformità con le norme nazionali per lo smaltimento dei prodotti elettrici ed elettronici e delle batterie.



WUXI HEALTHY MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.
No.2,Tuanjie Road,Xinba Village Industrial, Park,Xibei Town,
Xishan District,Wuxi City,Jiangsu, China



Caretechion GmbH - Niederheinstr. 71, 40474 Duesseldorf, Germany
Tel: +49 211 3003 6618, Dimdi
Code DE/0000048026

Importato da:SANICO Srl-Via G.Ferraris,37/41-20047 Cusago(MI)ITALY
info@sanicare.it-www.sanicare.it

Made in China

CE 0197

Versione: 4720 / Mod. PL157 HY-202