

- 8) Si consiglia di misurare per circa tre volte in modo da visualizzare il gruppo più alto di dati.
- 9) Quando si misura la temperatura della fronte umana, selezionare la modalità di "temperatura corporale", quando si misura la temperatura di altri oggetti, liquidi e alimenti, selezionare la modalità di "temperatura superficiale".
- 10) In caso di bassa temperatura della fronte causata da qualche motivo, è possibile provare a misurare all'orecchio per la misurazione, come mostrato nella figura seguente.

3.3.1. Iniziare la misurazione

1. Puntare sul bersaglio misuratore, premere il "tasto grilletto". Il display LCD mostrerà tutti i numeri caratteri. Poi la pistola a infrarossi per la temperatura corporea esegue l'autodiagnosi al momento dell'accensione, questa immagine viene visualizzata per circa 2 secondi.
- 2) Dopo il completamento dell'auto-test il sistema si "beep" (tutto lo stato in cui il suono dello strumento è aperto), che indica che l'accensione e la misurazione sono terminate. Nel frattempo, il display LCD visualizza il valore della temperatura del target misurato e il livello di illuminazione visualizza un colore verde, giallo e rosso in base alle impostazioni corrispondenti.

3.4. Configurazione dei modelli di misurazione

Sotto lo stato di accensione, premere brevemente il tasto MODE è possibile realizzare una comunicazione ciclica tra la modalità di "temperatura corporale" e la modalità di "temperatura superficiale". La modalità di "temperatura corporale" può essere utilizzata per misurare la temperatura nel corpo umano, mentre la modalità di "temperatura superficiale" può essere utilizzata per misurare la temperatura della superficie dell'oggetto. L'impostazione di fabbrica è la modalità di "temperatura superficiale".

3.5. Visualizzazione dei valori di memoria

Sotto lo stato di accensione, premere brevemente il tasto su o giù del tasto giù può realizzare query di memoria. Se si desidera esaminare i valori misurati in precedenza, premere brevemente il tasto giù. Se si desidera esaminare i numeri misurati recenti, premere brevemente il tasto su.

Nota:

- 1) Più grande è il valore numerico del numero seriale di memoria, più vecchio è il valore misurato.
- 2) Più piccolo è il valore numerico del numero seriale della memoria, più recente è il valore misurato.
- 3) Se c'è un valore in memoria, viene visualizzato direttamente il valore memorizzato, in caso contrario visualizza "----", come mostrato nel diagramma seguente.

Attenzione

Quando la temperatura supera il valore impostato della febbre bassa, la retroilluminazione LCD è rossa; quando la temperatura supera il valore impostato di febbre alta, la retroilluminazione LCD è rossa e il display LCD emette un piano, accompagnato da 3 suoni "beep" veloci, al fine di avvertire il paziente alla possibile febbre. Per garantire l'accuratezza della misurazione, è necessario attendere almeno 30 secondi dopo una misurazione continuata per 5 volte.

3.6. Comunicazione dei modelli di misurazione

Sotto lo stato di accensione, premere brevemente il tasto MODE è possibile realizzare una comunicazione ciclica tra la modalità di "temperatura corporale" e la modalità di "temperatura superficiale". La modalità di "temperatura corporale" può essere utilizzata per misurare la temperatura nel corpo umano, mentre la modalità di "temperatura superficiale" può essere utilizzata per misurare la temperatura della superficie dell'oggetto. L'impostazione di fabbrica è la modalità di "temperatura superficiale".

3.5. Visualizzazione dei valori di memoria

Sotto lo stato di accensione, premere brevemente il tasto su o giù del tasto giù può realizzare query di memoria. Se si desidera esaminare i valori misurati in precedenza, premere brevemente il tasto giù. Se si desidera esaminare i numeri misurati recenti, premere brevemente il tasto su.

Nota:

- 1) Più grande è il valore numerico del numero seriale di memoria, più vecchio è il valore misurato.
- 2) Più piccolo è il valore numerico del numero seriale della memoria, più recente è il valore misurato.
- 3) Se c'è un valore in memoria, viene visualizzato direttamente il valore memorizzato, in caso contrario visualizza "----", come mostrato nel diagramma seguente.

come indicatore di alta y baja temperatura, pantalla de retroiluminación de diferentes rangos de temperatura corporal y apagado automático,etc.

1.1.Rango de aplicación

- 1)Medición de la temperatura corporal.
- 2)Medición de la temperatura del objeto: por ejemplo, temperatura de la pasta o arroz;
- 3)Medición de la temperatura del líquido: por ejemplo, temperatura del agua del baño y temperatura de la leche.

Se espera que este producto sea utilizado por el personal médico en la clínica o por clientes en el entorno familiar.


1.2.Contraindicaciones

Nada

1.3.Características del producto

- 1)Precisión y rango: el nivel de medición puede alcanzar ± 0.2 ° C y la velocidad de medición puede llegar a 1 segundo;
- 2)Amplio medidor de temperatura: el rango de medición puede alcanzar 0.0-100.0 ° C;
- 3)Usos múltiples: Medición de la temperatura corporal; Medición de la temperatura del objeto: por ejemplo, temperatura de la pasta o arroz; Medición de la temperatura del líquido: por ejemplo, temperatura del agua del baño y temperatura de la leche.
- 4)Seguridad y salud: medición sin contacto de la temperatura de la frente. Tiene una distancia de medición de 1-5 cm en contacto con la piel humana para evitar infecciones cruzadas.
- 5)Múltiple y útil: medición de una temperatura de modo de comunicación de una temperatura y operación simple.
- 6)Alarma acústico-óptica: las luces de verde, amarillo y rojo retroiluminadas se usan para indicar si la temperatura corporal es normal, fiebre baja/alta, junto con una alerta sonora de "beep".
- 7)Múltiples series de memoria: puede almacenar 34 series de datos memorizadas para facilitar el análisis y la comparación.
- 8)Posicionamiento de rayo infrarrojo: es conveniente para el usuario fijar la posición del medición.
- 9)Configuración de temperatura: Sus parámetros de configuración pueden revisarse para adaptarse a series étnicas con diferentes colores de piel y cuerpos humanos con diferentes características.

1.4.Estructura del producto

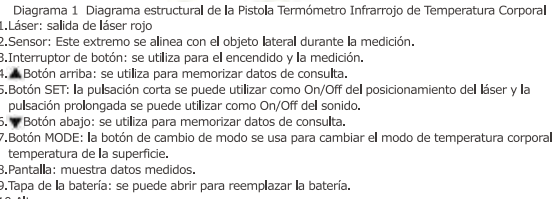

- 1)Sensor: El extremo superior se alinea con el objeto lateral durante la medición.
- 2)Interruptor de botón: se utiliza para el encendido y la medición.
- 3)Botón arriba: se utiliza para memorizar datos de consulta.
- 4)Botón SET: la pulsación corta se puede utilizar como On/Off del posicionamiento del laser y la pulsación prolongada se puede utilizar como On/Off del sonido.
- 5)Botón abajo: se utiliza para memorizar datos de consulta.
- 6)Botón BEEP: el botón de cambio de modo se usa para cambiar el modo de temperatura corporal.
- 7)Modo de la temperatura: el modo de la temperatura corporal puede ser cambiado a la temperatura de la superficie.
- 8)Modo de la temperatura: el modo de la temperatura corporal puede ser cambiado a la temperatura de la superficie.
- 9)Modo de la temperatura: el modo de la temperatura corporal puede ser cambiado a la temperatura de la superficie.
- 10)Modo de la temperatura: el modo de la temperatura corporal puede ser cambiado a la temperatura de la superficie.

1.5. Instrucción de pantalla



Es una práctica común usar la Pistola Térmómetro Infrarrojo de Temperatura Corporal para medir la temperatura corporal básica de la mujer cada día. Luego, se puede dibujar una forma de curvas de temperaturas corporales básicas. El período de ovulación se puede ver claramente en la tabla.

Temperatura corporal	Temperatura normal	Año	Temperatura normal
Temperatura de frente	36.7 ~ 37.8°C	0-2 años de edad	36.4 ~ 38.0°C
Temperatura de axila	35.5 ~ 37.5°C	3-10 años de edad	36.1 ~ 37.8°C
Temperatura de axila	34.7 ~ 37.3°C	11-65 años de edad	35.9 ~ 37.6°C
Temperatura de ano	36.6 ~ 38.0°C	> 65 años de edad	35.8 ~ 37.5°C

9. Declaración de la fabricante de la EUT

Instrucción y declaración del fabricante - emisión electromagnética para todos los EQUIPOS y SISTEMAS

1	Instrucción y declaración del fabricante - emisión electromagnética para todos los EQUIPOS y SISTEMAS
1	Instrucción y declaración del fabricante - emisión electromagnética para todos los EQUIPOS y SISTEMAS
2	Instrucción y declaración del fabricante - emisión electromagnética para todos los EQUIPOS y SISTEMAS
3	Instrucción y declaración del fabricante - emisión electromagnética para todos los EQUIPOS y SISTEMAS
4	Instrucción y declaración del fabricante - emisión electromagnética para todos los EQUIPOS y SISTEMAS
5	Instrucción y declaración del fabricante - emisión electromagnética para todos los EQUIPOS y SISTEMAS
6	Instrucción y declaración del fabricante - emisión electromagnética para todos los EQUIPOS y SISTEMAS
7	Instrucción y declaración del fabricante - emisión electromagnética para todos los EQUIPOS y SISTEMAS
8	Instrucción y declaración del fabricante - emisión electromagnética para todos los EQUIPOS y SISTEMAS
9	Instrucción y declaración del fabricante - emisión electromagnética para todos los EQUIPOS y SISTEMAS
10	Instrucción y declaración del fabricante - emisión electromagnética para todos los EQUIPOS y SISTEMAS

Nuestra compañía no asumirá ninguna responsabilidad de calidad por la falla de la máquina debido a que usted no cumple con las precauciones antena o otras medidas de aplicación correctas.

10. Garantía

1. Nuestra compañía proporcionará una garantía gratuita de un año desde la fecha de compra de este producto.

2. Nuestra compañía no proporcionará servicios de garantía gratuitos para las fallas causadas por las razones personales del usuario, como se muestra a continuación.

3. Fallos causados por el desmontaje o la reparación no autorizados de este producto;

4. Fallos causados por caídas accidentales durante el uso o el proceso de manejo;

5. Fallos causados por un mantenimiento inadecuado o la falta de un mantenimiento razonable;

6. Fallos causados por la falta de operación de acuerdo con el conocimiento correcto especificado en el manual;

7. Las fallas causadas por desastres naturales, por ejemplo, la inmersión y el fuego;

8. Fallos causados por reparaciones inadecuadas por el taller de reparaciones sin la autorización de nuestra compañía.

9. En caso de que se requiera un servicio gratuito, debe mostrar la tarjeta de garantía efectiva y el componente de compra.

10. En caso de que se requiera el servicio de garantía, si es necesario, se puede proporcionar un diagrama de circuito y datos de componentes reparables y partes del producto a los técnicos calificados reconocidos por nuestra parte.

11. El servicio de reparación superior y el valor de la garantía se cobrará según las regulaciones.

12. Los datos para reparación, como el diagrama del circuito, la lista de componentes y piezas, leyendas y las reglas de conexión, solo se pueden proporcionar al personal de reparación calificado y a la unidad capacitada por el fabricante.

3.7. Unit setup and correction setup

The default setting parameters of this product can be revised so as to adapt to populations with different skin colors or human bodies with different characteristics as well as populations under different ambient temperatures. Default settings are conducted before delivery. If not necessary, it is not recommended to revise factory default. If revision is required, please revise according to the following methods.

1. Unit setup F1:

Under the status of power-on, press MODE key for a long time, F1 appears on the screen. Short press of the down key (▼) can realize the switching between temperature units °C / °F.

2. Correction setup

Under the status of power-on, press MODE key for a long time, F1 appears on the screen, followed by another press of MODE key. The screen is switched from F1 to F2.

Then, press the up key (▲) to reduce 0.1 °C, and press the down key (▼) to add 0.1 °C.

4.Error message

Displayed problem

Meaning of the display

Possible reasons and troubleshooting

Hi

Too high measured temperature

Mode of body temperature: The temperature of the measured target is higher than 42.9 °C.

Mode of surface temperature: The temperature of the measured target is lower than 34 °C.

Mode of surface temperature: The temperature of the measured target is lower than 0.0 °C.

Lo

Too low measured temperature

Low battery, power off after the screen display is blank. Please replace battery at once.

Blank screen

Battery is not installed well

Check whether the positive and negative electrodes are fitted correctly and reversely.

Dead battery

Please replace batteries at once.

The screen is still blank

Please contact with dealer and send it for repair.

5.Battery replacement

Infrared Thermometer uses 2 AAA (7) batteries. When Infrared Thermometer prompts low battery, please refer to the method specified in the section of "3.1. Installing batteries" to replace low batteries.

Atencion

1) Cuando open battery cover to replace batteries, pay special attention to the polarities of batteries. Wrong placement may cause damages to products;

2) In use of a long period, replace the batteries so as to avoid damages to Infrared Thermometer caused by liquid leakage of batteries.

3) Please do not use it in case of liquid leakage or mildew;

4) Please do not keep batteries close to the fire so as to avoid battery explosion;

5) Please do not store batteries in high temperature and humidity;

6) To avoid short circuit, please do not put batteries and metal objects, including coins or keys, into the same closed container that may cause short circuit.

6.Maintenance and storage

1) Infrared probe is the most sophisticated part of the product. Please do not use finger or other objects to contact or press it. Careful protection is required, or it will affect the accuracy of the measured value.

2) Please use ethyl alcohol dhot or cotton dhot bedewed with 70% ethyl alcohol to clean the shell of Infrared Thermometer and do not let liquid enter into Infrared Thermometer. Never clean it with corrosive detergent, diluents or gasoline, let alone immersing this product into liquid other liquid.

5. Sostituzione della batteria

La pistola a infrarossi per la temperatura corporea utilizza 2 batterie AAA (7). Quando la pistola per la temperatura corporea a infrarossi ha le batterie scariche, fare riferimento al capitolo specificato nella sezione "3.1. Installazione delle batterie" per sostituire le batterie.

Attenzione

1) Quando si apre il coperchio della batteria per sostituire le batterie, prestare particolare attenzione alla polarità delle batterie. Il posizionamento errato può causare danni ai prodotti;

2) In caso di lungo periodo di non utilizzo, si prega di estrarre le batterie dal corpo del modo da evitare danni alle pile e a infrarossi per la temperatura corporea causata dalla perdita di liquido delle batterie.

3) Si prega di non usare in caso di perdite di liquido o di muffa;

4) Si prega di non tenere le batterie vicino al fuoco o di metterle nel fuoco in modo da evitare l'esplosione delle batterie;

5) Si prega di non conservare le batterie ad alta temperatura e umidità;

6) Per evitare cortocircuiti, non inserire batterie e oggetti metallici, inclusi monete o chiavi, nella stessa scatola; questi potrebbero causare cortocircuiti e danni;

6. Manutenzione e conservazione

1) La sonda a infrarossi è la parte più sofisticata del prodotto. Si prega di non usare dita o altri oggetti a contatto o pressione. È richiesta un'attenta protezione o infuria sulla precisione del valore misurato.

2) Utilizzare un panno di alcol etilico o un panno di cotone ricoperto di alcool etilico al 70% per pulire il corpo della pistola a infrarossi per la temperatura corporea e non lasciare che il liquido entri nella pistola a infrarossi per la temperatura corporea. Non pulire mai con detergenti corrosivi, olii, liquidi o benzina, o lasciare immerso questo prodotto in acqua o altro liquido.

3) Proteggere accuratamente la superficie del display LCD (display a cristalli liquidi).

4) Mettere la pistola a infrarossi per la temperatura corporea in un luogo asciutto ed evitare polvere, inquinamento o luce solare diretta.

7. Risoluzione dei problemi

Problema comune 1: qual è la ragione per cui "Lo" è apparso in misurazione nello stesso ambiente? Risposta: le possibili ragioni includono:

1) La distanza di misurazione è troppo lontana, può misurare la temperatura dell'ambiente circostante. La distanza di misurazione progettata per questa pistola a infrarossi per la temperatura corporea è di 1-5 cm. Lo schermo passa da F1 a F2. Quindi, premere il tasto Su (↑) per ridurre di 0,1 °C; e premere il tasto giù (↓) per aggiungere 0,1 °C.

4.Messaggio di errore

Problema visualizzato

Significato del display

Possibili cause e risoluzioni dei problemi

Hi

Temperatura misurata troppo alta

Modalità di temperatura corporea: la temperatura dell'obiettivo misurato è superiore a 42,9 °C; Modalità di temperatura superficiale: la temperatura dell'obiettivo misurato è superiore a 42,9 °C.

Lo

Temperatura misurata troppo bassa

Modalità di temperatura corporea: la temperatura dell'obiettivo misurato è inferiore a 34 °C; Modalità di temperatura superficiale: la temperatura dell'obiettivo misurato è inferiore a 0 °C.

Immagi

Suggerimento di batteria scarica

Batteria scarica, spegnimento dopo la visualizzazione nelle schermate di "Immagi". Si prega di sostituire le batterie in una volta.

La pistola della temperatura corporea a infrarossi si spegne automaticamente

La batteria non è installata correttamente

Controllare se gli elettrodi positivi e negativi ("+" e "-") sono montati in senso inverso

Batteria scarica

Si prega di sostituire le batterie in una volta.

Lo schermo è ancora vuoto

Si prega di contattare il rivenditore e inviarlo per la riparazione.

2. Temperatura di la superficie

3. Valore medio della temperatura.

4. Unità di grado Celsius

5. Indicatore di encender/apagado de posicionamiento laser

6. Indicador de batería baja.

7. Resultados de medición.

8. Unidad de grado Celsius

9. Número de serie de memoria

10. Número de serie de memoria

11. Número de serie de memoria

12. Número de serie de memoria

13. Número de serie de memoria

14. Número de serie de memoria

15. Número de serie de memoria

16. Número de serie de memoria

17. Número de serie de memoria

18. Número de serie de memoria

19. Número de serie de memoria

20. Número de serie de memoria

21. Número de serie de memoria

22. Número de serie de memoria

23. Número de serie de memoria

24. Número de serie de memoria

25. Número de serie de memoria

26. Número de serie de memoria

27. Número de serie de memoria

28. Número de serie de memoria

29. Número de serie de memoria

30. Número de serie de memoria

31. Número de serie de memoria

32. Número de serie de memoria

33. Número de serie de memoria

34. Número de serie de memoria

35. Número de serie de memoria

36. Número de serie de memoria

37. Número de serie de memoria

38. Número de serie de memoria

39. Número de serie de memoria

40. Número de serie de memoria

41. Número de serie de memoria

42. Número de serie de memoria

43. Número de serie de memoria

44. Número de serie de memoria

45. Número de serie de memoria

46. Número de serie de memoria

47. Número de serie de memoria

48. Número de serie de memoria

49. Número de serie de memoria

50. Número de serie de memoria

51. Número de serie de memoria

52. Número de serie de memoria

53. Número de serie de memoria

54. Número de serie de memoria

55. Número de serie de memoria

56. Número de serie de memoria

57. Número de serie de memoria

58. Número de serie de memoria

59. Número de serie de memoria

60. Número de serie de memoria

61. Número de serie de memoria

62. Número de serie de memoria

63. Número de serie de memoria

64. Número de serie de memoria

65. Número de serie de memoria

66. Número de serie de memoria

67. Número de serie de memoria

68. Número de serie de memoria

69. Número de serie de memoria

70. Número de serie de memoria

71. Número de serie de memoria

72. Número de serie de memoria

73. Número de serie de memoria

74. Número de serie de memoria

75. Número de serie de memoria

76. Número de serie de memoria

77. Número de serie de memoria

78. Número de serie de memoria

79. Número de serie de memoria

80. Número de serie de memoria

81. Número de serie de memoria

82. Número de serie de memoria

83. Número de serie de memoria

84. Número de serie de memoria

85. Número de serie de memoria

86. Número de serie de memoria

87. Número de serie de memoria

3.7. Configuración de la unidad e imposición de la corrección

Los parámetros de configuración predeterminados de questo producto siempre están en modo da adaptarse a poblaciones con diversos colores de la piel o corpi humanos con características diversas, nonché popolazioni a diverse temperature ambientali. Le impostazioni predefinite vengono eseguite prima della consegna. Se non necessario, non è consigliabile modificare le impostazioni di fabbrica. Se è necessaria la revisione, farlo in base ai seguenti metodi.

1. Impostazione unità F1:

Sotto lo stato di accensione, premere il tasto MODE a lungo, sullo schermo appare F1. Pressione breve del tasto giù (↓) può realizzare il passaggio tra le unità di temperatura °C / °F.

2. Impostazione della correzione

Sotto lo stato di accensione, premere a lungo il tasto MODE, sullo schermo appare F1, seguita da un'altra pressione del tasto MODE. Lo schermo passa da F1 a F2. Quindi, premere il tasto Su (↑) per ridurre di 0,1 °C; e premere il tasto giù (↓) per aggiungere 0,1 °C.

4.Messaggio di errore

Benutzerhandbuch

Infrarot Fieber- und Körperthermometer

Manuel d'exploitation

Pistolet infrarouge de température corporelle

Manuale operativo

Pistola a infrarossi per la temperatura corporea

Operación manual

Pistola Termómetro Infrarrojo Temperatura Corporal

Operation Manual

Infrared Thermometer

Version:Ver.1.0

Printed Version Number：ENSMIR72201901301

Applicable Models:YK-IRT2

Importato da: Sanico srl - Milano info@sanica.it - 02 90390038 MADE IN CHINA	Manufacturer: Xuzhou Yongkang Electronic Science Technology Co., Ltd. 4F Building C8, 40 Jingshan Road, Economic and Technological Development Zone, 221000 Xuzhou, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Company Name:Prolix GmbH Company Address:Brehmstr.56,40239,Duesseldorf Germany Competent Authority Code :DE/C4200 Fax : 0049 2131 4051968-9 Tel:0049 2131 4051968-0 Email : med@eulin.eu	 0123

Vorsicht

Wenn die Temperatur den eingestellten Wert für niedriges Fieber überschreitet, wird die LCD-Hintergrundbeleuchtung gelb. Wenn die Temperatur den eingestellten Wert für hohes Fieber überschreitet, wird die LCD-Hintergrundbeleuchtung rot und zeigt ein weißes Gesicht an, das mit drei schnellen „Piep“-Alarmen begleitet wird, um den Patienten vor möglichem Fieber zu warnen. Um die Messgenauigkeit zu gewährleisten, ist es erforderlich, mindestens 30 Sekunden nach einer 5-maligen kontinuierlichen Messung zu warten.


3.4.Wechsel des Messmodus

Beim Einschalten kann durch kurzes Drücken der MODE-Taste zwischen dem Modus „Körpertemperatur“ und dem Modus „Oberflächentemperatur“ gewechselt werden. Der Modus „Körpertemperatur“ kann zur Messung der Temperatur des menschlichen Körpers verwendet werden, während der Modus „Oberflächentemperatur“ zur Messung der Temperatur von Objektflächen verwendet werden kann. (Werkseinstellung ist der Modus „Oberflächentemperatur“.)

3.5.Anzeigen der Speicherdaten

Während das Gerät eingeschaltet ist, kann durch kurzes Drücken der **▲** oder **▼**-Taste eine Speicherfabrik durchgeführt werden. Wenn Sie ältere Messwerte einsehen wollen, drücken Sie kurz die **▲**-Taste. Wenn Sie die aktuellsten Messwerte einsehen wollen, drücken Sie kurz die **▲**-Taste.


Die größte der Zahlenwert der Seriennummer des Speichers ist, desto älter ist der Messwert. Je kleiner der Zahlenwert der Seriennummer des Speichers ist, desto aktueller ist der Messwert. 2. Wenn ein Speicher vorhanden ist, wird der gespeicherte Wert direkt angezeigt, oder es wird „---“ angezeigt, wie in der folgenden Abbildung.

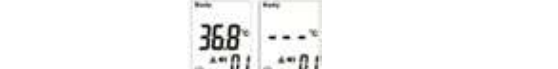

3. Das Infrarot-Thermometer kann maximal 34 Datensätze der zuletzt gemessenen Werte speichern. Sind bereits 34 Datensätze gespeichert, überschreiben die neuen Speicherdaten die Daten aus dem chronologischen Reihenfolge.

3.6.Löschen von Speicherdaten

Halten Sie während das Gerät ausgeschaltet ist die MODE-Taste gedrückt, während Sie die Triggertaste drücken. Es wird nur CLr auf dem Bildschirm angezeigt und schaltet sich nach 2 Sekunden wieder ab, ALLE Speicherdaten werden gelöscht.

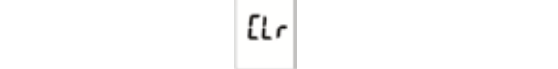

3.7.Geräteeinstellung und Korrektur-Setup Die vorinstallierten Parameter können so geändert werden, dass sie sich an bestimmte Eigenschaften menschlicher Körper wie unterschiedliche Hautfarben sowie an verschiedenen Umgebungstemperaturen anpassen lassen. Die Standardinstellungen werden von der Auslieferung vorgenommen, falls es nicht erforderlich ist, sollten Sie die Werkseinstellungen nicht ändern. Falls eine Änderung erforderlich ist, überprüfen Sie diese bitte nach den folgenden Methoden.

1.1. Geräteidentifizierung F1

Drücken Sie während das Gerät eingeschaltet ist die MODE-Taste lange, F1 erscheint auf dem Bildschirm. Durch kurzes Drücken der **▼**-Taste können Sie zwischen den Temperatureinheiten °C und °F wechseln.

38,1 (Werte definiert)~42,9 °C: Rouge Mise hors tension automatique: <10 secondes Stockage et transport: -20 ~ +45 °C, humidité relative: <85%

3.1. Fonctionnement et utilisation de l'instrument

3.1.1. Installation des piles 1) Pousser le couvercle de batterie dans le sens de la flèche pour ouvrir le couvercle de batterie; 2) Mettre 2 piles AAA, assurez-vous de bien orienter les pôles (+) et (-) des piles; 3) Appuyer sur le couvercle de batterie et le pousser dans le sens inverse de la flèche pour fermer le couvercle de batterie.

1. Laser: Laser laser rouge 2. Capteur: Carte bonnet aligne l'objet mesuré en cas de mesure, 3. Touche de déclenchement: Elle est utilisée pour la mise sous tension et la mesure, 4. ▲ Touche Haute: Elle est utilisée pour mémoriser les données de requête, 5. Touche SET: Appuyer brièvement sur cette touche pour activer/désactiver le positionnement du laser et appuyer longuement dessus pour activer/désactiver la touche sonore, 6. ▼ Touche Bas: Elle est utilisée pour mémoriser les données de requête, 7. Touche MODE: La touche de commutation de mode permet de changer le mode de température corporelle et de température de surface, 8. Écran d'affichage: Il affiche les données mesurées, 9. Couvercle de batterie: Il peut être ouvert pour remplacer les piles, 10. Haut-parleur

1.5. Instruction de l'écran d'affichage

Diagramme 2 Interface de l'écran d'affichage du pistolet infrarouge de température corporelle

- Température corporelle
- Température de surface
- Valeur mesurée de la température
- Assure de son ON/OFF
- Assure de positionnement laser/laser ON/OFF
- Assure de faible puissance des piles
- Spécifications techniques
- Environnement de travail: Température ambiante: 16 ~ 35 °C
- Humidité relative: <85%
- Mode de température de surface: 0~100,0 °C
- Taille du produit: longueur 150mm*75 mm*50 mm (longueur*largeur*hauteur)
- Poids du produit: 120g (sans piles)
- Plage de mesure: Mode de température corporelle: 34~42,9 °C
- Mode de température de surface: 0~100,0 °C
- Précision de mesure: 0,0~39,9 °C: ± 0,2 °C
- 34,0~39,9 °C: ± 0,3 °C
- 35,0~42,0 °C: ± 0,2 °C
- 42,0~42,9 °C: ± 0,3 °C
- 43,0~100,0 °C: ± 2 °C
- Distance de mesure: 5~15cm
- Retour-déclenchement: <2 secondes
- Tempérérage en trois couleurs: Mode de température de surface: Vert
- Mode de température corporelle: 34,0~37,3 °C: Vert
- 37,4~38,0 °C (valeur définie~0,1 °C): Jaune



Diagramme 2 Interface de l'écran d'affichage du pistolet infrarouge de température corporelle

- Température corporelle
- Température de surface
- Valeur mesurée de la température
- Assure de son ON/OFF
- Assure de positionnement laser/laser ON/OFF
- Assure de faible puissance des piles
- Spécifications techniques
- Environnement de travail: Température ambiante: 16 ~ 35 °C
- Humidité relative: <85%
- Mode de température de surface: 0~100,0 °C
- Taille du produit: longueur 150mm*75 mm*50 mm (longueur*largeur*hauteur)
- Poids du produit: 120g (sans piles)
- Plage de mesure: Mode de température corporelle: 34~42,9 °C
- Mode de température de surface: 0~100,0 °C
- Précision de mesure: 0,0~39,9 °C: ± 0,2 °C
- 34,0~39,9 °C: ± 0,3 °C
- 35,0~42,0 °C: ± 0,2 °C
- 42,0~42,9 °C: ± 0,3 °C
- 43,0~100,0 °C: ± 2 °C
- Distance de mesure: 5~15cm
- Retour-déclenchement: <2 secondes
- Tempérérage en trois couleurs: Mode de température de surface: Vert
- Mode de température corporelle: 34,0~37,3 °C: Vert
- 37,4~38,0 °C (valeur définie~0,1 °C): Jaune

Tension de la batterie: DC3V (2 piles AAA (7))

Plage de mesure: Mode de température corporelle: 34~42,9 °C

Précision de mesure: 0,0~39,9 °C: ± 0,2 °C

Distance de mesure: 5~15cm

Retour-déclenchement: <2 secondes

Tempérérage en trois couleurs: Mode de température de surface: Vert

Mode de température corporelle: 34,0~37,3 °C: Vert

37,4~38,0 °C (valeur définie~0,1 °C): Jaune

Partie mesurée

Température normale

Température de la crotte

Température du front

Température de la cavité

Température de la cavité

Température de la cavité

Température de la cavité

Température de la cavité

Température de la cavité

Température de la cavité

Température de la cavité

Température de la cavité

Bedienungsanleitung (German)

Ver.1.0

Infrarot Fieber- und Körperthermometer

Lesen Sie bitte vor der Anwendung des Infrarot-Thermometers diese Anleitung sorgfältig durch und wenden Sie das Thermometer richtig an. Bewahren Sie diese Anleitung zum Nachschlagen auf. (Die Bilder in diesem Handbuch dienen nur als Referenz.)

Wichtige Sicherheitshinweise

- Bitte verwenden Sie das Infrarot-Thermometer nicht für Zwecke, für die es nicht hergestellt wurde und nicht geeignet ist. Dieses Produkt ist für professionelle und häusliche Zwecke geeignet.
- Das Infrarot-Thermometer ist nicht wasserdicht. Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Die Reinigung und Desinfektion muss den Anweisungen im Abschnitt Wartung und Lagerung entsprechen.
- Lagern Sie das Infrarot-Thermometer an einem sauberen, trockenen und sonnengeschützten Ort mit einer Luftfeuchtigkeit von weniger als 85%.
- Berühren Sie die Linse nicht mit dem Finger.
- Leuchten Sie mit dem Laserstrahl nicht in die Augen, da dies für die Augen unangenehm sein kann und sogar das Sehvermögen beeinträchtigen könnte.
- Hindernisse wie Schweiß, Haare, Mützen oder Schläfen können dazu führen, dass eine niedrigere Temperatur gemessen wird. Verwenden Sie das Thermometer richtig, um sicherzugehen, dass korrekte Messergebnisse erzielt werden.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen, zerlegen, reparieren oder verändern, indem Sie es nicht.
- Halten Sie sich nicht in der Nähe von starkem elektromagnetischem Feld oder hochfrequenten Magnetfeldern auf, um Auswirkungen auf die Genauigkeit der Messdaten zu vermeiden.
- Wenden Sie sich im Falle eines Problems an den Händler und verwenden Sie das Thermometer bitte nicht weiter. Reparieren Sie es nicht selbst.
- Wenn Sie die Batterie und das Produkt nicht mehr verwenden können, entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Nehmen Sie die Batterie bei längerer Nichtbenutzung heraus, um ein Auslaufen zu vermeiden.
- Mischen Sie neue Batterien nicht mit gebrauchten Batterien, um eine Gefährdung oder Beschädigung des Produkts durch inkonsistente Erdeigenschaften der Batterien zu vermeiden.
- Warnungen: a. Bitte bewahren Sie das Infrarot-Thermometer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. b. Halten Sie die Batterien von Feuer fern. c. Die Verwendung des Infrarot-Thermometers ersetzt nicht die medizinische Behandlung.

Logos und Zeichen

Zeichen	Beschreibung	Zeichen	Beschreibung
	Type BP		Seriennummer
	WEEE/2002/96/EC		Herstellungsdatum
	Siehe Bedienungsanleitung		Hersteller
	Sonnenecht meiden		Trocken halten

3.1. Allgemeine Beschreibung Dieses Gerät ist ein berührungsfreies Infrarot-Thermometer. Es verfügt über zwei verschiedene Messmodi: Körpertemperatur- und Oberflächentemperaturmodus. Es kann 34 Datensätze aufzeichnen. Es verfügt über folgende Funktionen: Anzeige hoher/niedriger Temperatur, Hintergrundbeleuchtung für verschiedene Körpertemperaturbereiche und automatische Abschaltung.

2. Korrektur-Setup Drücken Sie beim Einschalten die MODE-Taste lange, F1 erscheint auf dem Bildschirm. Durch kurzes Drücken der **▼**-Taste, um 0,1 °C zu reduzieren und die **▲**-Taste, um 0,1 °C hinzuzufügen.

4. Fehlermeldung

Angezeigtes Problem	Bedeutung	Mögliche Gründe und Fehlerbehebung
HI	Gemessene Temperatur zu hoch	Körpertemperaturmodus: Die gemessene Temperatur liegt über 42,9 °C. Oberflächentemperaturmodus: Die gemessene Temperatur liegt über 100 °C.
Lo	Gemessene Temperatur zu niedrig	Körpertemperaturmodus: Die gemessene Temperatur liegt unter 34 °C. Oberflächentemperaturmodus: Die gemessene Temperatur liegt unter 0 °C.
Batteriestatus-Blick	Batterie sehr schwach	Batterie schwach, ersetzen Sie das Gerät aus. Tauschen Sie die Batterien sofort aus.
Leerer Bildschirm	Gerät schaltet sich automatisch aus	Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Triggertaste drücken.
	Batterie nicht richtig eingeklinkt	Überprüfen Sie ob die Batterien entsprechend der richtigen Polung eingeklinkt sind.
	Batterie leer	Tauschen Sie die Batterien aus.
	Bildschirm blinkt leer	Kontrollieren Sie Ihren Händler

5. Batteriewechsel Das Infrarot-Thermometer verwendet 2 AAA (7) Batterien. Wenn das Infrarot-Thermometer eine schwache Batterie anzeigt, beachten Sie bitte im Abschnitt "Einlegen der Batterien" beschriebene Methode zum Wechseln der Batterien.

1. Wenn Sie den Batteriedeckel öffnen, achten Sie besonders auf die Polarität der Batterien. Falsch eingebaute Batterien können zu Schäden am Produkt führen.

2. Nehmen Sie bei längerer Nichtbenutzung der Batterien heraus, um Schäden am Infrarot-Thermometer durch ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden.

3. Verwenden Sie das Gerät nicht wenn Batterien ausgefallen sind oder bei Schimmel.

4. Halten Sie die Batterien von Feuer fern, um eine Explosion der Batterien zu vermeiden.

5. Lagern Sie Batterien nicht bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit.

6. Um einen Kurzschluss zu vermeiden, legen Sie bitte keine Batterien und Metallgegenstände, einschließlich Münzen oder Schlüssel, in dieselbe Tasche oder andere Behälter, die einen Kurzschluss verursachen können.

6. Wartung und Lagerung 1. Die Infrarot-Thermometer ist sehr anspruchsvoll. Teil des Geräts, Berühren oder drücken Sie sie nicht mit dem Finger oder anderen Gegenständen. Ein sorgfältiger Schutz ist erforderlich, da sonst die Genauigkeit des Messwertes beeinträchtigt wird.

2. Bitte verwenden Sie ein mit 70% Ethylalkohol getränktes Acrylkohlnetz oder Baumwolltuch, um die Oberfläche des Infrarot-Thermometers zu reinigen und lassen Sie keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen. Reinigen Sie es niemals mit alkoholischen Reinigungsmitteln, Verdünnungsmitteln oder Benzin und tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

3. Schützen Sie die Oberfläche des LCD (Flüssigkristallanzeige) sorgfältig.

4. Bewahren Sie das Infrarot-Thermometer an einem trockenen Ort auf und vermeiden Sie Staub, Verschmutzung oder direkte Sonneneinstrahlung.

7. Fehlerbehebung Häufiges Problem 1: Warum erscheint bei der Messung in der gleichen Umgebung „Lo“?

Antwort: Folgende Gründe sind möglich:

- Der Messabstand ist zu groß, es kann sein, dass die Temperatur der Umgebung gemessen wurde, nicht der Messabstand dieses Infrarot-Thermometers beträgt 5-15 cm, der ideale Messabstand liegt bei ca. 6 cm.
- Die Messposition weicht stark ab. Bei der Messung der Körpertemperatur wird das Infrarot-Thermometer auf die Mitte der Stirn (oberhalb der Augenbrauenbogens) gerichtet und senkrecht gehalten.
- „Lo“ kann angezeigt werden, wenn Haare die gemessene Stelle auf der Stirn bedecken oder wenn eine

1.1. Verwendungszweck

Das Infrarot-Thermometer hat folgende Verwendungszwecke:

- Messung der Körpertemperatur: Körpertemperatur;
- Messung der Oberflächentemperatur: z.B. Temperatur von Reis;
- Messung der Flüssigkeittemperatur: z.B. Temperatur des Badewassers und Temperatur der Milch;
- Großer Temperaturbereich: Der Messbereich ist 0,0~100°C;
- Vielfache Anwendung:

1.2. Kontraindikationen

Kontraindikationen: Gegenanzeigen:

- Präzise und schnell: Die Messabweichung kann ±0,2°C betragen, die Messgeschwindigkeit kann 1 Sekunde erreichen;
- Großer Temperaturbereich: Der Messbereich ist 0,0~100°C;
- Vielfache Anwendung:

Messung der Oberflächentemperatur: Temperatur des menschlichen Körpers; Messung der Körpertemperatur: z.B. Temperatur von Reis; Messung der Flüssigkeittemperatur: z.B. Temperatur des Badewassers und Temperatur der Milch;

4. Sicherheit und Gesundheit: Berührungsfreie Messung der Temperatur an der Stirn. Der Messabstand beträgt 5-15 cm ohne Kontakt zur menschlichen Haut, um eine Kreuzinfektion zu vermeiden.

5. Einfach und nützlich: Ein-Taste-Messung, Ein-Taste-Messmodus und einfache Bedienung.

6. Akustischer Alarm: Grüne, gelbe und rote Hintergrundbeleuchtung zeigen an, ob die Körpertemperatur normal ist, niedriges Fieber oder hohes Fieber. Zusammen mit einem Piepton, gemessen wurde.

7. Mehrere Speicherdaten: Es können bis zu 34 Datensätze gespeichert und einfach analysiert und verglichen werden.

8. Laser-Polierung: Der Anwender kann die genaue Messposition bestimmen.

9. Korrektur-Setup: Die Setup-Parameter können überschrieben werden, um sich an ethnische Gruppen mit unterschiedlicher Hautfarbe und menschliche Körper mit unterschiedlichen Eigenschaften anzupassen.

1.4. Produktbeschreibung

1. Rotor Laserausgang

2. Sensor für Messung

3. Triggertaste: Sie dient zum Einschalten und Messen

4. ▲ Taste: Speichern von Adfragedaten

5. SET-Taste: Kurzer Tastendruck: Ein/Aus-Taste der Laserpositionierung

6. W Taste: Kurzer Tastendruck: Ein/Aus-Taste des Tons

7. ▲ Taste: Speichern von Adfragedaten

8. MODE-Taste: Wechsel zwischen Modus der Körpertemperatur und Oberflächentemperatur

9. Anzeigebildschirm: Anzeige der gemessenen Daten

10. Lautsprecher

11. Batteriedeckel

12. Laserstrahl

1.5. Display-Bildschirms

Klimaanlage oder starker Wind auf die Stirn blasen. Die Messung sollte erneut durchgeführt werden, nachdem die Person sich 5-10 Minuten lang in einer für die Messung geeigneten Umgebung befindet.

4. Bei einer geringen Anzahl Menschen ist die Oberflächentemperatur der Stirn niedriger als bei gewöhnlichen Menschen. Als Ergebnis kann das „Lo“ angezeigt werden. Ein Vergleich kann durchgeführt werden, indem die Oberflächentemperatur an der Stirn einer anderen Person gemessen wird, nachdem das Infrarot-Thermometer für die Messung auf den Modus „Oberflächentemperatur“ eingestellt wurde. Die Körpertemperatur dieser Person kann als normal beurteilt werden.

Hauptzugmerk sollte auf Alarm bei hoher Temperatur oder "HI" bei Fieber gelegt werden.

Häufiges Problem 2: Kann das Infrarot-Thermometer dem menschlichen Körper schaden? Wird der menschliche Körper Strahlung ausgesetzt?

Das Infrarot-Thermometer sendet die Infrarot-Wärmestrahlung des menschlichen Körpers, um die Körpertemperatur zu berechnen. Es gehört zum passiven Infrarot-Strahlungsbereich. Das Thermometer wird nicht direkt Kontakt mit dem menschlichen Körper verwendet. Dadurch kann es nicht zu einer Kreuzinfektion verschiedener menschlicher Körper kommen. Das von dieser Firma hergestellte Infrarot-Thermometer verursacht keine Strahlung für den menschlichen Körper, so dass sie keine Schäden am menschlichen Körper verursacht.

8. Allgemeines Verständnis der Körpertemperatur Der menschliche Körper ist ein sehr komplexes, ganzheitliches biologisches System und die Körpertemperatur ist ein sehr wichtiger Vitalwert. Generell überprüfen wir unseren Gesundheitszustand, indem wir die Temperatur an der Stirn, im Ohr, in der Achselhöhle, im Anus oder in der Mundhöhle messen. An den verschiedenen Stellen können unterschiedliche Temperaturen gemessen werden. Die spezifischen Unterschiede sind als Referenz in der folgenden Tabelle 1 dargestellt.

Gemessene Stelle	Normale Temperatur	Alter	Normale Temperatur
Ohr	35,8 ~ 38,0 °C	0-2 Jahre	36,4 ~ 38,0 °C
Stirn	34,7 ~ 37,8 °C	3-10 Jahre	36,1 ~ 37,8 °C
Mundhöhle	35,5 ~ 37,5 °C	11-65 Jahre	35,9 ~ 37,6 °C
Armgegend	34,0 ~ 36,0 °C	>65 Jahre	35,8 ~ 37,5 °C
Arms	36,6 ~ 38,0 °C		

Tabelle 1 Die Temperatur des menschlichen Körpers ändert sich im Laufe des Tages. Die Temperatur wird auch von äußeren Bedingungen wie Alter, Geschlecht, Hautfarbe und Hautdicke beeinflusst. Die Veränderung der Körpertemperatur im Laufe der Zeit ist in Tabelle 1 dargestellt. Die Körpertemperatur der Frau unterscheidet sich von der des Mannes. Im Allgemeinen ist die Körpertemperatur der Frau um etwa 0,3°C höher als die des Mannes. Die Körpertemperatur der Frau ist während des Eisprungs um 0,3°C, 0,2°C höher als sonst. Dies kann verwendet werden, um ein Ereignis, obendre der Eisprung stattfindet, zu identifizieren. Mit dem Infrarot-Thermometer kann jeden Tag die Grundtemperatur der Frau gemessen werden. Dann kann ein Kurvendigramm mit der täglichen Körpertemperatur gezeichnet werden. Die Ovipulationszeit ist aus der Tabelle ersichtlich.

7. Übernehmen keine Verantwortung für fehlerhafte Messungen oder Gerätefehler, die auf Nichtbeachtung der oben genannten Vorsichtsmaßnahmen oder anderer korrekter Anwendungsmethoden zurückzuführen sind.

9. Leitlinien und Herstellererklärung - Elektromagnetische Strahlung für andere Geräte und Systeme

Das Infrarot-Thermometer ist für den Einsatz in bestimmten elektromagnetischen Umgebungen konzipiert. Benutzer des Infrarot-Thermometers können es in den folgenden Umgebungen einsetzen.

Strahlungstyp	Übersichtsumgebung	Elektromagnetische Umgebung
HF-Störungen CISPR 11	Gruppe 1	Das HF-Signal des Infrarot-Thermometers wird nur durch die interne Funktion erzeugt. Daher ist die HF-Strahlung sehr gering und verursacht wahrscheinlich keine Störungen in der Nähe von elektronischen Geräten.

3.3. Commencement de la mesure 1) Voir la cble mesurée, appuyer sur la «touche de déclenchement». L'écran LCD affiche tous les chiffres et caractères. Comme le pistolet infrarouge de température corporelle effectue une auto-inspection au moment de la mise sous tension, cette image afficherait pendant environ 2 secondes.

2) Une fois l'affichage terminé, le «bip» retentira (sous l'état que le son de l'instrument est ouvert), ce qui indique que la mise sous tension et la mesure sont terminées. Pendant ce temps, l'écran LCD affiche la valeur de la température de la cible mesurée et la rétroéclairage affiche une couleur verte, jaune et rouge en fonction des paramètres correspondants.

3.4. Commutation des modes de mesure 1) Configuration de l'unité: Sous l'état de mise sous tension, appuyez sur la touche MODE pendant un long moment, F1 apparaît à l'écran. Une presse courte sur la touche Bas (▼) peut réaliser la commutation entre les unités de température: °C / °F.

2) Paramètres d'étalonnage Sous l'état de mise sous tension, appuyez sur la touche MODE pendant un long moment, F1 apparaît à l'écran. Une autre presse sur la touche MODE. L'écran passe à F1.2. Ensuite, appuyez sur la touche Haut (▲) pour réduire 0,1 °C et appuyez sur la touche Bas (▼) pour ajouter 0,1 °C.

4. Message d'erreur

Sous l'état de mise sous tension, appuyez sur la touche MODE pendant un long moment, F1 apparaît à l'écran. Une autre presse sur la touche MODE. L'écran passe à F1.2. Ensuite, appuyez sur la touche Haut (▲) pour réduire 0,1 °C et appuyez sur la touche Bas (▼) pour ajouter 0,1 °C.

3.7. Configuration de l'unité et paramètres d'étalonnage

Les paramètres de réglage de la température corporelle de ce produit peuvent être révisés afin de s'adapter aux populations ayant différents couleurs de peau et des corps humains différents avec des caractéristiques différentes, ainsi que des populations à différentes températures ambiantes. Les paramètres par défaut sont effectués avant la livraison. Si cela n'est pas nécessaire, il n'est pas recommandé de modifier les paramètres par défaut. Si une révision est requise, veuillez réviser selon les méthodes suivantes.

1) Configuration de l'unité: Sous l'état de mise sous tension, appuyez sur la touche MODE pendant un long moment, F1 apparaît à l'écran. Une presse courte sur la touche Bas (▼) peut réaliser la commutation entre les unités de température: °C / °F.

2) Paramètres d'étalonnage Sous l'état de mise sous tension, appuyez sur la touche MODE pendant un long moment, F1 apparaît à l'écran. Une autre presse sur la touche MODE. L'écran passe à F1.2. Ensuite, appuyez sur la touche Haut (▲) pour réduire 0,1 °C et appuyez sur la touche Bas (▼) pour ajouter 0,1 °C.

4. Message d'erreur

Sous l'état de mise sous tension, appuyez sur la touche MODE pendant un long moment, F1 apparaît à l'écran. Une autre presse sur la touche MODE. L'écran passe à F1.2. Ensuite, appuyez sur la touche Haut (▲) pour réduire 0,1 °C et appuyez sur la touche Bas (▼) pour ajouter 0,1 °C.

3.7. Configuration de l'unité et paramètres d'étalonnage

Les paramètres de réglage de la température corporelle de ce produit peuvent être révisés afin de s'adapter aux populations ayant différents couleurs de peau et des corps humains différents avec des caractéristiques différentes, ainsi que des populations à différentes températures ambiantes. Les paramètres par défaut sont effectués avant la livraison. Si cela n'est pas nécessaire, il n'est pas recommandé de modifier les paramètres par défaut. Si une révision est requise, veuillez réviser selon les méthodes suivantes.

1) Configuration de l'unité: Sous l'état de mise sous tension, appuyez sur la touche MODE pendant un long moment, F1 apparaît à l'écran. Une presse courte sur la touche Bas (▼) peut réaliser la commutation entre les unités de température: °C / °F.

2) Paramètres d'étalonnage Sous l'état de mise sous tension, appuyez sur la touche MODE pendant un long moment, F1 apparaît à l'écran. Une autre presse sur la touche MODE. L'écran passe à F1.2. Ensuite, appuyez sur la touche Haut (▲) pour réduire 0,1 °C et appuyez sur la touche Bas (▼) pour ajouter 0,1 °C.

4. Message d'erreur

Sous l'état de mise sous tension, appuyez sur la touche MODE pendant un long moment, F1 apparaît à l'écran. Une autre presse sur la touche MODE. L'écran passe à F1.2. Ensuite, appuyez sur la touche Haut (▲) pour réduire 0,1 °C et appuyez sur la touche Bas (▼) pour ajouter 0,1 °C.

3.7. Configuration de l'unité et paramètres d'étalonnage